





dfv

evolução
na OPTICA

60
anos

você vê, trabalha e documenta

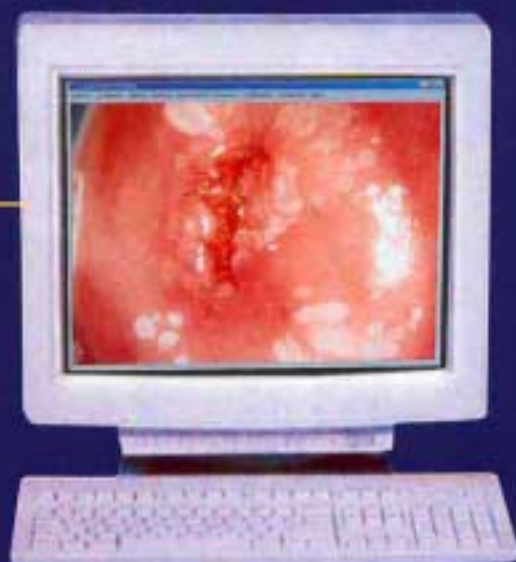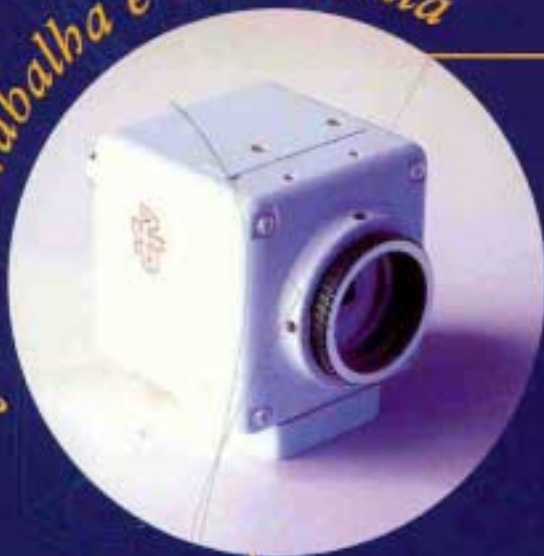

UMA NOVA VISÃO NA GINECOLOGIA

- Segurança e qualidade na prevenção do câncer e HPV.
- Melhor qualidade de atendimento, mais clientes no consultório.
- Procedimentos mais precisos com imagem estereoscópica.
- Exames, diagnósticos e intervenções com segurança.
- Alta definição da imagem.
- Procedimentos menos invasivos.
- Auxilia na orientação ao paciente.
- Comunicação, marketing e documentação médico-legal.



QUALIDADE ÓPTICA E CONFORTO

Sistema de vídeo para captura de imagem pela televisão e computador.

Sistema de fotografia.

Sistema para segunda observação.



UM INVESTIMENTO PARA SUA VIDA PROFISSIONAL

Completa linha de Colposcópios com os melhores recursos técnicos e versões econômicas. Faça sua opção:

BINÓCULO

- Reto 160mm - adequado aos procedimentos ginecológicos.
- Inclinado a 45° 125mm - alternativa à sua escolha.
- Inclínável de 0 a 60° - maior conforto ao médico (opcional).
- todos com ajuste de distância interpupilar.

AUMENTOS

- Sistema zoom motorizado ou manual (2x a 14x) - magnificação ideal para cada procedimento.
- Tambor seletor com 3 ou 5 alternativas de aumentos (4, 7 e 13x ou 3, 4, 7, 13 e 17x) ou aumento fixo (7x).

FOCO

- Microfocalização manual - simples e de fácil ajuste.
- Possibilidade de microfocalização motorizada acionada por pedal (opcional).

DIOPTRIAS

- Oculares grande angular 12,5x - ajuste personalizado de dioptria.

DISTÂNCIA DE TRABALHO

- Objetiva F:300mm - distância confortável e adequada.

ESTATIVAS

- De chão com rodízios - duas versões para clínicas e ambulatórios, resistentes e com longa vida útil. Duas versões para consultórios, leves e práticas.
- De mesa - fixada à mesa ginecológica, reduz o espaço ocupado.
- Braço - articulado ou pantográfico.

ILUMINAÇÃO

- Transmissão de luz por fibra óptica - conforto da luz fria.
- Gerador com 2 lâmpadas - troca rápida quando necessário.
- Gerador com 1 lâmpada - menor custo.
- Gerador com transformador automático, 100 a 240V, no M900M - maior praticidade.

A patologia do Trato Genital Inferior adquiriu, nos últimos anos, enorme importância dentro da Toco-Ginecologia moderna. Novas pesquisas sobre o HPV tornaram o Colposcópio um equipamento indispensável na sua prevenção.



MC-M1015

CP-M65

ESTATIVAS RESISTENTES E COM LONGA VIDA ÚTIL, ADEQUADAS PARA CLÍNICAS E AMBULATÓRIOS



**COLPOSCÓPIO CP-M2500
IDEAL PARA CONSULTÓRIOS**



ME-M6

MICROSCÓPIO MONOCULAR

- Estrutura metálica.
- Adequado para clínicas, laboratórios e consultórios, para exames de lâminas a fresco.
- Aumentos de 23 a 600 vezes.
- Duas oculares (7 e 15x)
- Três objetivas (3.3, 8, e 40x).

linha completa de COLPOSCÓPIOS

MODELO CPG

REG. ANDV/MS: Nº 101.263.70009 FDA CE



*conforto
do zoom*

MC-M1015



*acionamento
prático da
coluna*

M900M



*praticidade
do foco
manual*

MC-M1010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA	TROCA DE ALIMENTOS	AUMENTOS	CAMPO OBSERVADO	ILUMINAÇÃO	CAMPO ILUMINADO
MC-M1015 MC-M1015M	zoom motorizado zoom manual	2 a 14x	91 a 15mm	2 lâmpadas 15V-150W Fibra Óptica	75mm
M900M ¹ MC-M1010	tambor 5 aumentos	3, 4, 7, 13 e 17x	79 a 13mm		
CP-M2500 ² / CP-M2510 ³	tambor 5 aumentos	3, 4, 7, 13 e 17x	79 a 13mm	1 lâmpada 15V-150W Fibra Óptica	45mm
CP-M2300 ² / CP-M2310 ³	tambor 3 aumentos	4, 7 e 13x	50 a 19mm		
CP-M2100 ² / CP-M2110 ³	fixo	7x	32mm		
CP-M122 ^{2,4}	fixo	7x	35mm	1 lâmp. halógena 8V-20W	

LEGENDAS: 1- Transformador automático 100 a 240V. Outras referências, selecionáveis em 110 ou 220V. 2- Estativa de chão. 3- Estativa de mesa. 4- Divisor de luz, incorporado à cabeça óptica, para vídeo.



*ideal para
consultório*

CP-M2500



*menor espaço
ocupado*

CP-M2510



*eficiência
com menor
custo*

CP-M122



D.F.VASCONCELLOS S. A.
Av. Indianópolis, 1706 CEP 04062-901 São Paulo - SP
PABX (11) 5584 0411 Fax (11) 5585 2300
vendas@dfv.com.br www.dfv.com.br



Consulte nosso suporte científico.